

Snabbguide

Analys av graviditetstest – Clinitest Med användar-ID


STEG
1

Tryck på "Analysera kassett"



STEG
2

Tryck på "Senaste användare" eller
"Ange nytt användarnamn/användar-id"

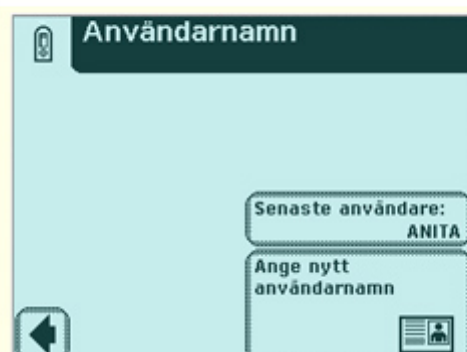

STEG
3

Ange ditt användarnamn/användar-id
genom att skanna VGR-id med
streckkodsläsaren.

Tryck på "OK"



STEG
4

Tryck på "Ange ny patient"



Snabbguide

Analys av graviditetstest – Clinitest

Med användar-ID


STEG
5

Skanna patient-id med streckodsläsaren



STEG
6

Tryck på "Clinitest hCG-kassett"

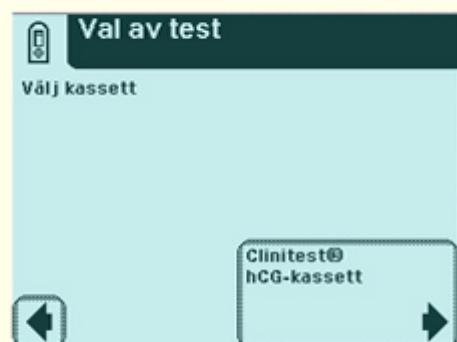

STEG
7

Placera kassetten på testsläden.
Dra upp urin i medföljande pipett.
Tryck på START samtidigt som urinen pipetteras i provbrunnen.



STEG
8

Efter ca 5 minuter är svaret klart och en pappersremsa skrivs ut.
Vid positivt prov kan testet analyseras snabbare.

