
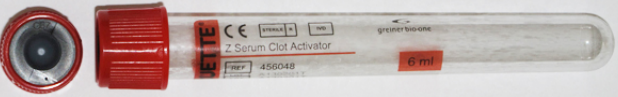



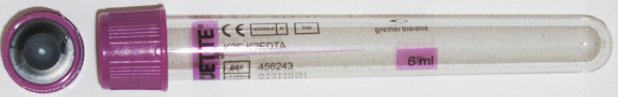









<ul style="list-style-type: none"> - Bild på kork och rör - Används till analysgrupper m.m. - Korkfärg, tillsats, volym, system 	<p>VGR produktnr</p>
 <p>Koagulationsanalyser Ljusblå kork, Citrat, 5 / 2,7mL, Plasma</p>	<p>103 280 483</p>
 <p>Läkemedelsanalyser Röd kork, koagulationsaktivator, 7 / 6mL, Serum</p>	<p>200 000 986</p>
 <p>Serum med gel Guldgul kork, koagulationsaktivator med gel, 7 / 5mL, Serum</p>	<p>200 000 968</p>
 <p>Kemi-analyser i plasma Ljusgrön kork, Li-Heparin med gel, 7 / 4,5mL, Plasma</p>	<p>104 790 563</p>
 <p>Hematologi, SR, HbA1c, Takrolimus, Lila kork, K₂-EDTA, 5 / 4mL, Helblod alt. Plasma</p>	<p>200 000 987</p>
 <p>Blodgruppering, BAS-test, Renin, HLA B27 Lila kork, K₂-EDTA, 7 / 6mL, Helblod alt. Plasma</p>	<p>200 000 980</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Bild på kork och rör - Används till analysgrupper m.m. - Korkfärg, tillsats, volym, system 	<p>VGR produktnr</p>
 <p>PTH Vit kork, K₂-EDTA med gel, 7 / 5mL, Plasma</p>	<p>200 000 928</p>
 <p>Glukos; Får inte användas till P-Glukos HemoCue! Rosa kork, Fluorid-Citrat, 5 / 3mL, Plasma</p>	<p>200 000 981</p>
 <p>Kromosomprov Grön kork, Li-Heparin, 5 / 4mL, Helblod</p>	<p>102 770 237</p>
 <p>Standardbikarbonat, Laktat, Metaller, Genetik m.fl. Mörkblå kork, Na-Heparin (NH), 5 / 4mL, Helblod alt Plasma</p>	<p>106 121 197</p>
 <p>De flesta urinanalyser, se analyslista Gul kork, inga tillsatser, 7 / 6,5mL, Urin</p>	<p>200 000 988 Överföringsstrå 200 000 974 200 000 978</p>
 <p>Obs! Endast fåtal analyser ex. Csv, Urinsediment Gul kork, inga tillsatser, 10 mL, Urin</p>	<p>102 769 965</p>

Bild på rör	Benämning korkfärg /tillsats /system	Används till analysgrupper m.m.	VGR produktnr
	Lila kork K ₂ -EDTA Helblod/ plasma	Hematologi HbA1c	103 280 400
	Ljusgrön kork Li-heparin med gel Plasma	Kem 1	103 280 426
	Röd kork koagulations- aktivator Serum	Läkemedel serum- analyser	103 280 442
	Gul kork med gel och koagulations- aktivator Serum	Allergi, Htg serum- analyser	103 280 459
	Grön kork Li-heparin Helblod	Kromsom prov Genetik	103 280 392
	Grå kork Na/FI/K/Oxalat Plasma	Glukos	200 000 993
 	Laddare till värmedynor Prod.nr: 114 205 511 Värmedyna Prod.nr: 102800109 (9x13cm) 106213184 (6x9cm)	 	Triomix Blodvagg för 1-5 rör Prod.nr blå: 102 841 970 Rosa: 114 538 259

Rör för provtagning inom NU-sjukvårdens upptagningsområde



Rekommenderad rörföljd vid venprovtagning

- Blododlingsflaskor
- Ljusblå kork
- Röd kork, Guldgul kork
- Ljusgrön kork
- Lila kork,
- Vit kork
- Rosa/grå kork, grön kork, blå kork

Alla rör vänds **omedelbart** 8-10ggr
Kontrollera alltid rätt provrör i analyslistan vid osäkerhet