

			Titel Instruktion för hantering av farligt gods i Västra Götalandsregionen		
Dokumenttyp	Utgåva	Dokument beteckning	Bilagenum mer	Antal bilagor	Antal sidor
Rutin	2013-01-14	6.1.8	---	---	3
Författare	Dokumentägare		Fastställt		Giltigt från
Säkerhetsrådgivarna i VGR	Västra Götalandsregionen		111018		111018

Klassificering, paketering, märkning av diagnostiska och övriga prover

Diagnostiska prov, UN 3373

Hit räknas prov från människor t.ex. exkret, sekret, blod och blodbeståndsdelar, vävnad och vävnadsvätska, som skall transporteras för diagnostik eller forskningsändamål.

Den som avsänder/skickar medicinska och biologiska prover är ansvariga att proverna skickas enligt gällande bestämmelser, ICAO-TI och IATA-DGR:s förpackningsinstruktion PI 650. (Se förpackningsinstruktion bilaga 1) Proverna skall vara rätt klassificerade, rätt paketerade och rätt märkta.

För paketering av prover UN 3373 som skall skickas med Posten AB, gäller följande:

Provförpackning skall alltid bestå av:

- Ett tätt provrör av glas eller plast med tättslutande gummipropp eller skruvlock
- Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen
- En tät och skyddande transporthylsa
- En skyddande **provlåda av kartong** enligt bilden



(Beställningsnummer 415119)

Märkning

Alla prover som skickas i provlåda av kartong eller i provpåse skall vara märkt med UN 3373. Intill den kvadratformade märkningen skall den officiella transportbenämningen "BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B" / "BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B" anges på ytterförpackningen med minst 6 mm höga bokstäver.


Flertalet provförpackningar som beställs från Depåerna är förtryckta, se då till att märkningen är rätt enligt bilderna ovan.

Paketering gällande prover UN 3373 som skickas mellan enheter inom regionen.

Diagnostiska och övriga prover som skickas/transporteras mellan enheter inom Västra Götalandsregionens kan skickas i en enklare provpåse och packas enligt bestämmelserna i ADR-S förpackningsinstruktion P 650.

Provförpackning ska alltid bestå av:

- Ett tätt provrör av glas eller plast med tättslutande gummipropp eller skruvlock
- Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen
- En tät och skyddande transporthylsa
- En skyddande provpåse enligt bilden nedan

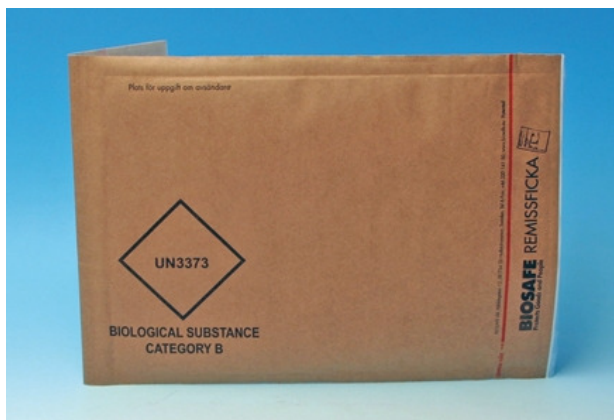

(Beställningsnummer 415135)

Märkning

Alla prover som skickas i provlåda av kartong eller i provpåse skall vara märkt med UN 3373. Intill den kvadratformade märkningen skall den officiella transportbenämningen "BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B" / "BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B" anges på ytterförpackningen med minst 6 mm höga bokstäver.

Flertalet provförpackningar som beställs från Depåerna är förtryckta, se då till att märkningen är rätt enligt bilderna ovan.

För ytterligare information se
Smittskyddsinstitutets "Packa Provet Rätt" www.smittskyddsinstitutet.se

Smittförande ämnen, UN 2814

Hit räknas prov som misstänks innehålla mikroorganismer exempelvis av digniteten Ebolavirus eller större mängder uppodlade kulturer av mikroorganismer. (Ej enstaka prov.) Klassificering enligt ADR 2.2.62.1.4. Finns i Packa provet rätt.

Smittförande ämnen UN 2814 går inte att skicka med Posten Sverige AB utan skall skickas med Jetpak. För beställning av transport kontakta Jetpak på telefon 077-570 00 00.

Paketering, märkning och dokumentation

Provförpackning skall alltid bestå av:

- Ett tätt provrör av glas eller plast med tättslutande gummipropp eller skruvlock
- Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen
- En tät och skyddande transporthylsa
- En skyddande UN godkänd provlåda t.ex. NOAX-låda, beställningsnummer 415120 Depåerna , eller annan förpackning som uppfyller kraven enligt förpackningsinstruktion P 620
- Provlådan skall vara märkt med UN 2814
- Etiketteras med etikett klass 6.2 och lägespilar

Transport av prover UN 2814 kräver ifylld godsdeklaration och transportkort samt att övriga bestämmelser i ADR-S, följs (utbildad förare och ADR-utrustad bil).

Transporten utförs av Jetpak tfn 077-570 00 00

Godsdeklaration, Beställningsnummer Depåerna 900135

Har du frågor kontakta din lokala Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods

Förvaltning/motsvarande	Namn och funktion	Kontaktuppgifter
SU och Kungälv	Eric Agerling, Säkerhetsrådgivare	031-343 25 68 0736-88 94 11 eric.agerling@vgregion.se
Servicedistrikt FyrBoDal och NUsjukvården	Jimmie Vikingsson, Säkerhetsrådgivare	010-44 10 960 070-23 18 660 jimmie.vikingsson@vgregion.se
SÄS	Iréne Backlund, Säkerhetsrådgivare	033-616 40 81 irene.backlund@vgregion.se
SkaS och Regiontransporter	Anders Gustafsson Säkerhetsrådgivare	010-44 13 666 0705-88 38 05 anders.o.gustafsson@vgregion.se